

AutoMini



Den rette lyd fra tv'et til dit høreapparat



Mere end bare høj lyd

Når du ser fjernsyn, vil du gerne kunne høre godt uden unødigt høj lydstyrke. Løsningen hedder AutoMini, en personlig lydforstærker, som passer til alle, der anvender høreapparat med telespole. Med AutoMini får du altid den rigtige lydstyrke uden forstyrrende baggrundsstøj, uanset hvilken lydstyrke din familie og dine venner foretrækker.

Den rigtige lyd til det rigtige billede – også med digitalboks

Med AutoMini får du den rigtige lyd til det rigtige billede. AutoMini tilsluttes automatisk, uanset om du skifter mellem for eksempel dvd-afspiller og video. Autoopkoblingen fungerer også uden problemer med digitalboks. AutoMini genkender den enhed, du har valgt, og skifter lydkilde, samtidig med at fjernsynet ændrer billedkilde. Det bliver nemt og problemfrit at se fjernsyn.

Fleksibel og funktionel

Uanset hvilke tilslutningsmuligheder, der findes på dit fjernsyn, vil det fungere med AutoMini. Du får god lydforstærkning, uanset hvilket fjernsyn du ser på.

Skræddersyet lydregulering

Du skal normalt bare indstille volumen på AutoMini én gang, når du installerer den. Derefter holder den automatiske volumenkontrol (AGC) lydniveauet konstant, også hvis fjernsynets volumen ændres.

Nem at tilslutte

AutoMini tilsluttes mellem dit fjernsyn og pudeslyngen. Fjernsynslyden overføres derefter fra pudeslyngen direkte til dit høreapparat ved hjælp af telespolen.

Pudeslyngen og tilbehør til de tre tilslutningsmuligheder følger med AutoMini. Du kan også lytte via en hals-slynge med separat volumenkontrol (medfølger ikke). Uanset hvilken løsning du vælger, får du altid en behagelig og naturlig lydoplevelse.

Nem at tage med

AutoMini er lille og praktisk at tage med på rejser eller i sommerhuset. Du tilslutter den nemt til det fjernsyn, du vil se på. Du kan vælge din egen fjernsynsvolumen overalt uden at blive forstyrret af eller forstyrre andre.




3.

Andre løsninger til opnåelse af den rette tv-lyd

AutoMini fungerer sammen med alle fjernsynsapparater. Den kan opfange lyden fra dit fjernsyn på tre forskellige måder:

1. Via fjernsynets Line Out-udgang
2. Via fjernsynets scart-udgang
3. Via en mikrofon, som fastgøres på fjernsynets højttaler

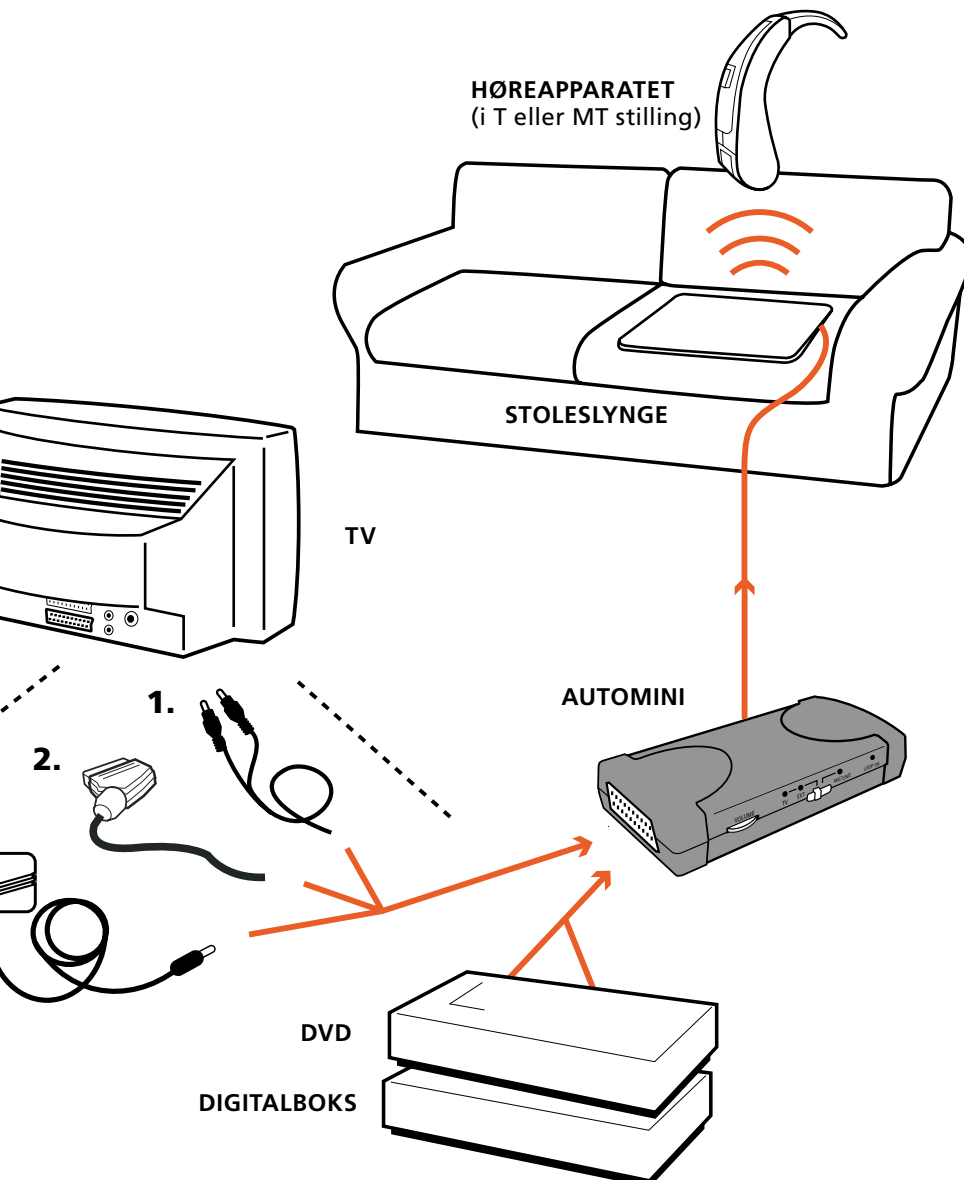

Transett Mini

Forgængeren for AutoMini. Enkel forstærker til stol- eller halslyng. Kobles til tv'et via scartstik eller mikrofon.



TS-150

En kraftigere slyngeforstærker end AutoMini, men med samme automatiske lydafbryderfunktion. Meget velegnet til hjemmet eller mindre lokaler (maks. 150 m²). Frem for en stoleslynge installeres der en slynge i rummet, så høreapparatet kan opfange lyden overalt.

Artikelnummer

AutoMini-sæt, EU 200 21 81

Indgår i AutoMini-sæt, EU:

AutoMini 200 10 32
 Netadapter 200 10 37
 RCA-kabel med 3,5 mm jackstik, 1,5 m 200 10 33
 Scartkabel 200 10 39
 Mikrofon FXT med 3,5 mm jackstik, 4 m 200 60 13
 Stoleslynge 200 20 45

Ekstra tilbehør:

Halsslynge med volumenkontrol 414 01 60
 Forbindelsesledning til halsslynge 200 20 26

TS-150, loop amplifier, EU 200 10 23

Transett Mini set, EU 200 21 48

Tekniske data

AutoMini-forstærker

Indgangssignal: 50 mV – 12 V
 Udgangsbelastning: 4 ohm
 Udgangseffekt: 6 W ved 4 ohm
 Indsvingningstid: 50 ms
 Udsvingningstid: 35 s
 Frekvensområde: 100 Hz – 8 kHz, -3 dB rel. 1 kHz
 Forvrængning: <1%
 Signalstøjforhold: >40 dB A-vægt
 Vægt: 150 g (uden netadapter)
 Mål: 145 x 70 x 30 mm
 (med beslag ca. 38 mm)

Ekstern netadapter

Plug-in adapter,
 primær 230 VAC 50 Hz, sekundær 12 VAC 15 VA

Stoleslynge

Modstand: 4 ohm
 Mål: 43 x 43 x 2 cm



Spørgsmål angående det Medicinske Direktiv 93/42/EEC skal rettes til GN ReSound A/S.

ANSVARLIG PRODUCENT

Jvf. EU:s medicinske
 direktiv 93/42/EEC:

GN ReSound A/S

Lautrupbjerg 7
 DK-2750 Ballerup
 Danmark

Ang. service- og produktrelaterede
 spørgsmål: Kontakt Sicom A/S.

KONTAKT

Sicom A/S

Kollens Møllevej 30
 Stjær
 DK-8464 Galten

Tel. +45 70 20 84 22
 Fax +45 86 95 06 78
 sicom@sicom.dk

www.gnresound-ald.se