

# CONFERENCE™

Een vergaderset met twee microfoons en een inductieve ringleiding in een elegante map

## Praktische vergaderset

De Conference™ is een uniek product waarmee slechthorende mensen op het werk of thuis aan vergaderingen kunnen deelnemen. Twee microfoons, een versterker en een inductieve ringleiding zijn ingebouwd in een elegante map, die de gebruiker voor zich op tafel legt.

## Dubbele microfoon

De Conference is uitgerust met twee microfoons die de afstand tot de stem van de aanwezigen verminderen en het geluid naar het hoortoestel overdragen. Voor een nog kortere afstand tot uw gesprekspartner kunt u een externe microfoon aansluiten.



## Ingebouwde ringleiding

Door het hoortoestel in de T-stand te zetten, kunnen slechthorende mensen gebruik maken van de ingebouwde inductieve ringleiding. Voor meer bewegingsvrijheid wordt een nekbus meegeleverd. De interne ringleiding wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de nekbus aansluit.

## Een vergadering opnemen

Soms wilt u geen enkele belangrijke informatie missen. Dan is het handig om een vergadergesprek op te nemen. De Conference heeft een 3,5 mm jackplug voor opname en weergave in mono.

## Batterijen

De Conference werkt op batterijen die lang meegaan. De batterijen zijn eenvoudig te vervangen.


# TECHNISCHE GEGEVENS

Frequentiebereik:	200-8000 Hz, -3 dB rel. 1 kHz.
Microfoons:	2 stuks, ingebouwd.
Ingang:	Externe microfoon.
Uitgangen:	Neklus. Bandrecorder (3,5 mm, ingang: tip, uitgang: ring).
Voeding:	4 × LR6/AA 1,5 V penlight.
Levensduur batterij:	±100 uur.
Veldsterkte:	+12 dB rel. 100 mA/m bij 0,7 mV (70 dB SPL) vanaf de microfoons bij een afstand van 45 cm tot de ringleiding.
Vervorming:	<3%.
Versterking:	0,7 mV van de microfoons geeft 250 mV bij opname met een bandrecorder. De bandrecorderuitgang kan ook voor weergave worden gebruikt.
Stroomverbruik:	25-200 mA.
Gewicht:	±1,3 kg.



Alle zaken betreffende de EU-Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG dienen gemeld te worden aan GN ReSound A/S.

Bestelnummer: 415 04 04

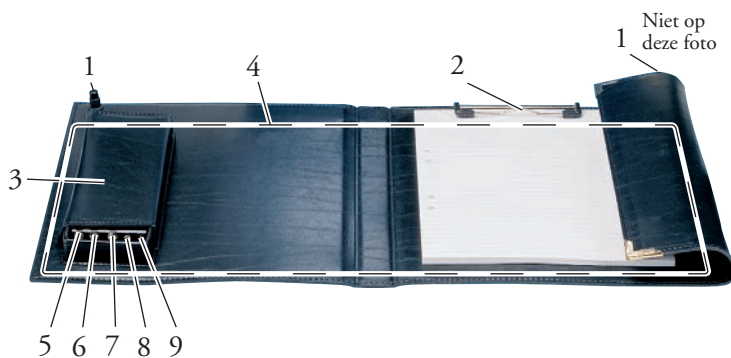

1. Microfoons
2. Paperclip
3. Vak voor batterijen en nekklus
4. Ingebouwde inductieve ringleiding
5. Bandrecorder in/uit
6. Microfoon in
7. Nekklus uit
8. AAN/UIT-schakelaar
9. LED-indicator AAN/UIT

#### BELGIË:

**GN ReSound Belgium n.v.**  
Pontbeekstraat 2 (2de verdiep)  
B 1702 Groot-Bijgaarden  
  
Tél. +32 2 229 34 60  
Fax +32 2 229 34 69

#### NEDERLAND:

**GN ReSound bv**  
Postbus 85  
6930 AB  
Westervoort  
Het Hazeland 5-7  
6931 KA  
Westervoort

Tel. +31 26 31 95 000  
Fax +31 26 31 95 001  
info@gnresound.nl  
www.gnresound-ald.com

#### PRODUCENT

*in de betekenis van*  
*Europese Richtlijn Medische*  
*Hulpmiddelen 93/42/EEG:*  
**GN ReSound A/S**  
Lautrupbjerg 9  
DK-2750 Ballerup  
Denemarken

*Voor vragen m.b.t. service*  
*en producten: zie contact-*  
*gegevens voor elk land.*