

TS-150™

En slyngeforstærker til hjemmet og lokaler op til 150 m². Giver perfekt fjernsynslyd i høreapparatet til alle, der befinder sig i rummet.



Passer til alle høreapparater med telespole
TS-150 passer til alle, der anvender høreapparat med telespole, som ønsker at lytte til fjernsynet eller stereoanlægget uden at blive forstyrret af andre lyde.

Fungerer med digitalboks

Er fjernsynet tilsluttet digitalboks, video, DVD osv.? Ikke noget problem: den automatiske omkoblingsfunktion opfanger, hvilken enhed der vælges, og giver korrekt lyd i høreapparatet.

Automatisk volumenkontrol

TS-150 skal kun indstilles en enkelt gang. Derefter holder den automatiske volumenkontrol (AGC) lyden til høreapparatet konstant, også hvis fjernsynets volumen ændres. Alle bliver tilfredse!

Perfekt lyd i hele rummet

TS-150 giver perfekt lyd, uanset hvor man befinder sig i rummet. TS-150 kan drive en teleslynge på op til 150 m². Passer glimrende til hjemmet eller f.eks. mødelokaler.

Flere kan lytte samtidig


Med en teleslynge i rummet kan et ubegrænset antal høreapparatbærere lytte samtidig. Eller i hvert fald så mange, som der er plads til... TS-150 har endda indgange til mikrofoner og PA-systemer.

TS-150 passer til:

- Fjernsyn med scart-kontakt (scart-tilslutning, se illustration).
- LCD/Plasma-fjernsyn (line out-tilslutning se illustration).
- Stereo, radio, MP3-afspiller osv.

Tilslutning:

- Udlæg en teleslynge i fjernsynsrummet og tilslut den til TS-150.
- Tilslut TS-150 mellem fjernsynet videoen (øvrige enheder tilsluttes i serie).
- Juster indgangsniveauet, indtil en gul lampe tændes.
- Juster udgangsniveauet, indtil en rød lampe tændes.
- Den er klar, du behøver ikke at røre ved TS-150 mere!

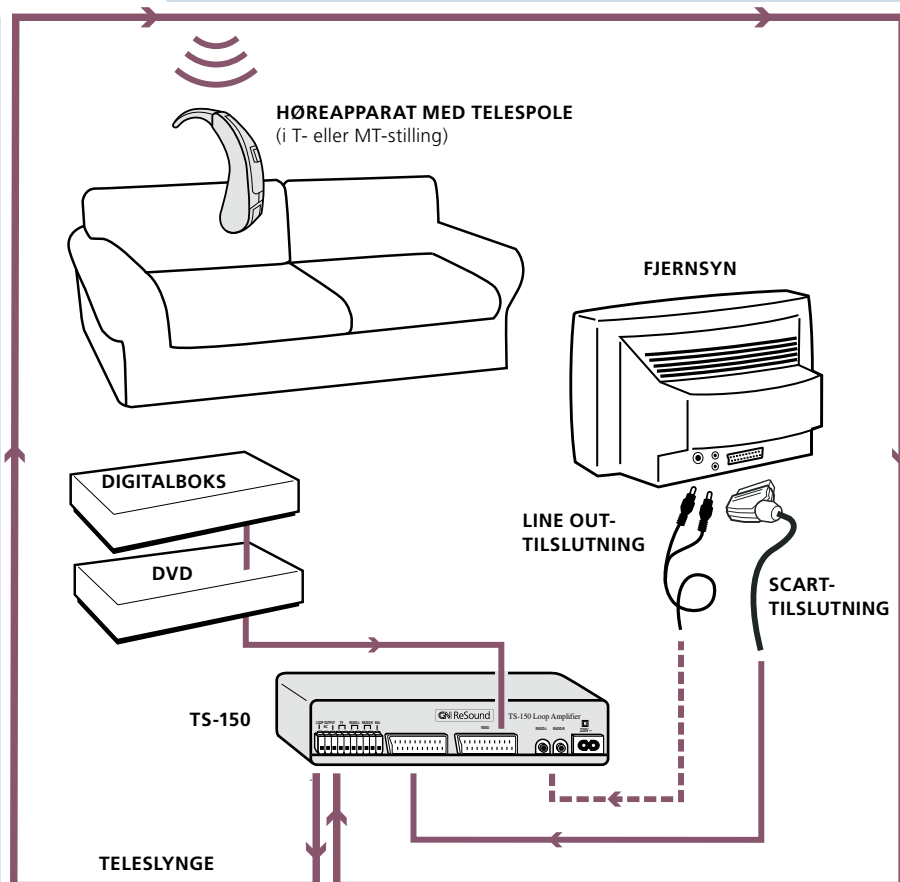

TEKNISKE DATA

Tekniske specifikationer

TS-150 slyngeforstærker

Driftspænding:	230V AC 50-60 Hz
Slyngeareal:	Iflg. DS/EN 60118-4 op til 150 m ²
Frekvensområde:	Iflg. DS/EN 60118-4 100-5000 Hz ±3dB
Forvrængning:	<1%
Indsvingningstid:	>125 ms
Udsvingningstid:	Hurtig 5 s / langsom 30 s (dip-switch)
Vægt:	1,7 kg
Mål (B x D x H):	250 x 140 x 55 mm
Egenskaber:	AGC: Langsom, hurtig og lukket Tonekontrol: Justerbar diskant
Indgange:	Fjernsyn, video, radio, balanceret og mikrofon

Teleslyngen

Modstand:	0,5 – 1 Ohm
-----------	-------------

Artikelnummer

TS-150, loop amplifier, EU 200 10 23

Indgår i TS-150, loop amplifier, EU:

TS-150 slyngeforstærker	200 10 32
Scartkabel	200 10 25
Netkabel	–
Skruer, plugs og skruetrækker	–



Spørgsmål angående det Medicinske Direktiv 93/42/EEC skal rettes til GN ReSound A/S.

Andre løsninger til opnåelse af den rette tv-lyd



AutoMini

Mindre slyngeforstærker til stole-slynge (medfølger) eller induktiv sløjfe på op til 20 m². AutoMini har den samme automatiske lyd-omkoblingsfunktion som på TS-150. AutoMini passer til alle typer af fjernsyn og er let at installere og tage med på rejsen.

AutoMini-sæt, EU 200 21 81



Transett Mini

Forgænger for AutoMini. Enkel forstærker til stole- eller halsslynge. Kobles til tv'et via scartstik eller mikrofon.

Transett Mini set, EU 200 21 48

ANSVARLIG PRODUCENT

Jvf. EU:s medicinske direktiv 93/42/EEC:

GN ReSound A/S

Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark

Ang. service- og produktrelaterede spørgsmål: Kontakt Sicom A/S.

KONTAKT

Sicom A/S

Kollens Møllevej 30
Stjær
DK-8464 Galten

Tel. +45 70 20 84 22
Fax +45 86 95 06 78
sicom@sicom.dk

www.gnresound-ald.se