

AutoMini



Rätt ljud från TV:n till din hörapparat



Mer än bara hög volym

När du tittar på TV vill du kunna höra bra utan att höja volymen i onödan. Lösningen heter AutoMini, en personlig ljudförstärkare som passar alla som använder hörapparat med telespole. Med AutoMini får du alltid rätt ljudstyrka, utan störande bakgrunds-ljud, oavsett vilken volym din familj och dina vänner föredrar.

Rätt ljud till rätt bild – även med digitalbox

Med AutoMini får du rätt ljud till rätt bild. AutoMini kopplar automatiskt om när du växlar mellan till exempel DVD-spelare och video. Även med digitalbox fungerar autokopplingen utan problem. AutoMini känner av vilken enhet du har valt och byter ljudkälla samtidigt som TV:n ändrar bildkälla. Ditt TV-tittande blir bekvämt och störningsfritt.

Flexibel och funktionell

Oavsett vilka inkopplingsmöjligheter som finns på din TV, kommer den att fungera med AutoMini. Du får god ljudförstärkning vilken TV du än tittar på.

Skräddarsydd ljudkontroll

Du behöver vanligtvis bara ställa in volymen på AutoMini en gång när du installerar. Därefter håller den automatiska volymkontrollen (AGC) ljudnivån konstant, även om volymen på TV:n ändras.

Enkel att koppla in

AutoMini kopplar du in mellan din TV och stolslingan. TV-ljudet överförs sedan från stolslingan direkt till din hörapparat med hjälp av telespolen.

Stolslingan och tillbehör för de tre inkopplingsalternativen medföljer AutoMini. Du kan även lyssna via en halsslinga med separat volymkontroll (**medföljer ej**). Vilket alternativ du än väljer, får du alltid en behaglig och naturlig ljudupplevelse.

Bekväm att ta med


AutoMini är liten och behändig att ta med på resan eller till sommarstugan. Du kopplar den enkelt till den TV-apparat du vill titta på. Du kan välja din egen TV-volym överallt, utan att störas av eller störa någon annan.



3.

AutoMini fungerar med alla TV-apparater. Den kan ta upp ljudet från din TV-apparat på tre olika sätt:

1. Via TV:ns Line Out-uttag
2. Via TV:ns scartuttag
3. Via mikrofon som fästs på TV-högtalaren

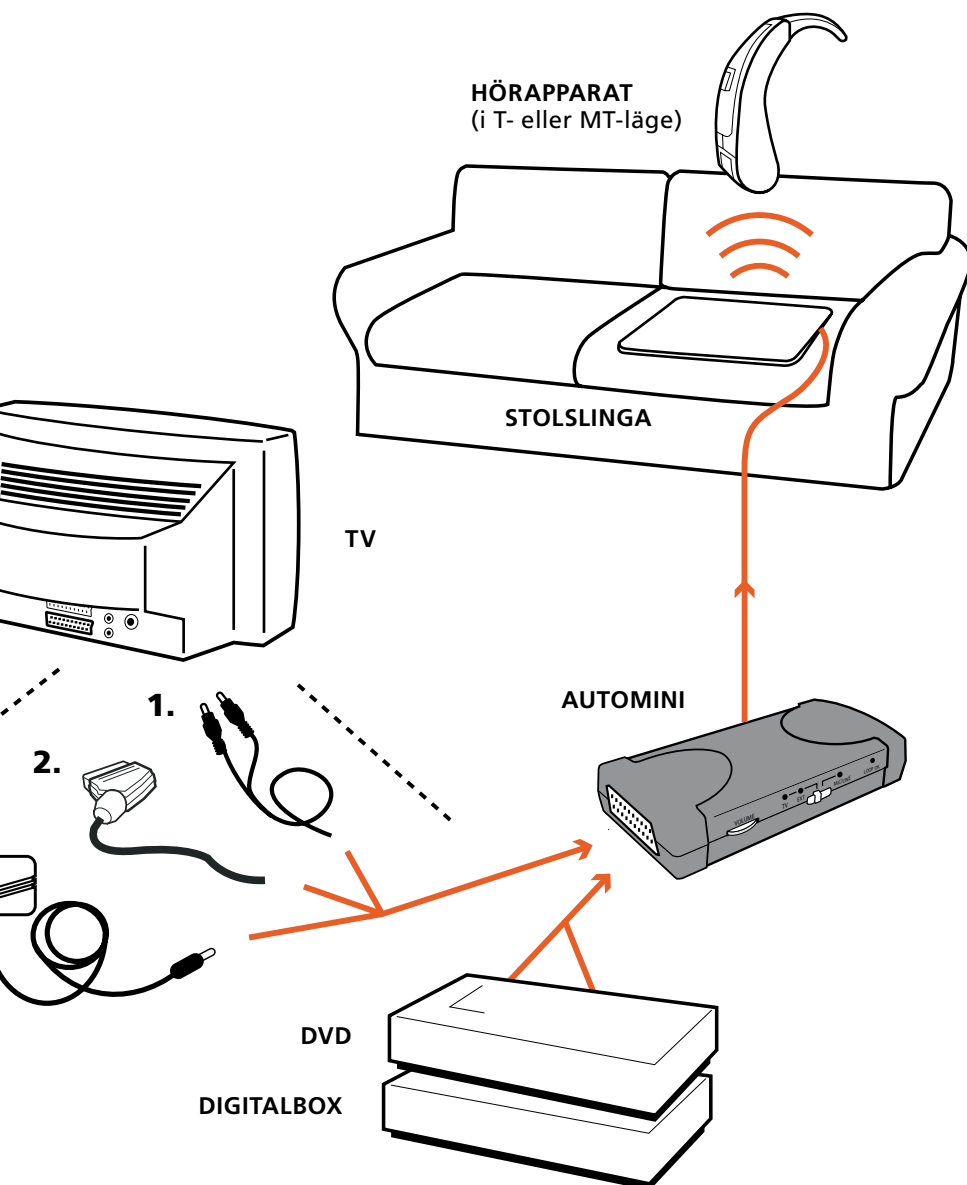

Andra lösningar för rätt TV-ljud



Trasett Mini

Föregångaren till AutoMini. Enkel förstärkare för stol- eller halsslina. Kopplas till TV:n via Scart eller mikrofon.



TS-150

Kraftigare slingförstärkare än AutoMini, med samma automatiska ljudomkopplingsfunktion. Utmärkt för hemmet eller mindre lokaler (max 150 m²). Istället för slingkudd- de installeras en slinga i rummet så att hörapparaten kan plocka upp ljudet överallt.

Artikelnummer

AutoMini set, EU 200 21 81

Ingår i AutoMini set, EU:

AutoMini 200 10 32

Nätadapter 200 10 37

Kabel RCA 3,5 mm jack, 1,5 m 200 10 33

Scartkabel 200 10 39

Mikrofon FXT 3,5 mm jack, 4 m 200 60 13

Stolslinga 200 20 45

Extra tillbehör:

Halsslinga med volymkontroll 414 01 60

Anslutningsladd för halsslingan 200 20 26

TS-150, loop amplifier, EU 200 10 23

Transett Mini set, EU 200 21 48

Tekniska data

AutoMini förstärkare

Insignal: 50mV-12V

Utgångsbelastning: 4 Ohm

Uteffekt: 6 W vid 4 Ohm

insvängningstid: 50 ms

utsvängningstid: 35 s

Frekvensomfång: 100 Hz-8 kHz, -3 dB rel. 1 kHz

Distorsion: <1%

Signal/brusförhållande: >40dB A-vägt

Vikt: 150 g (utan nätadapter)

Mått: 145 x 70 x 30 mm
(med uppfästning ca 38 mm)

Extern nätadapter

Pluginadapter, primär 230VAC 50Hz, sekundär 12VAC 15VA

Stolslingan

Resistans: 4 Ohm

Dimensioner: 43 x 43 x 2 cm



Frågor rörande EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEC hänvisas till GN ReSound A/S.

ANSVARIG TILLVERKARE

enligt EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEC:

GN ReSound A/S

Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark

För service och produktrelaterade frågor, kontakta GN ReSound AB.

KONTAKT

GN ReSound AB

Box 128 74
112 98 Stockholm

Tel. vxl. 031-800 150

Fax 08-54 55 36 39

info.ald@gnresound.se

www.gnresound-ald.se