

CONFERENCE™

Een vergaderset met twee microfoons en een inductieve ringleiding in een elegante map

Praktische vergaderset

De Conference™ is een uniek product waarmee slechthorende mensen op het werk of thuis aan vergaderingen kunnen deelnemen. Twee microfoons, een versterker en een inductieve ringleiding zijn in een elegante map ingebouwd, die de gebruiker voor zich op tafel legt.

Dubbele microfoon

De Conference is uitgerust met twee microfoons die de afstand tot de aanwezigen verminderen en het geluid naar het hoortoestel overdragen. Voor een nog kortere afstand tot uw gesprekspartner kunt u een externe microfoon aansluiten.



Ingebouwde ringleiding

Dankzij de ingebouwde inductieve ringleiding kunnen hoortoestelgebruikers de T-stand van hun toestel kiezen. Voor meer bewegingsvrijheid wordt een nekbus meegeleverd. De interne ringleiding wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de nekbus aansluit.


Een vergadering opnemen


Soms wilt u geen enkele belangrijke informatie missen. Dan is het handig om een vergadergesprek op te nemen. De Conference heeft een 3,5 mm jackplug voor opname en weergave in mono.

Batterijen

De Conference werkt op batterijen die lang meegaan. De batterijen zijn eenvoudig te vervangen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Frequentiebereik:	200-8000 Hz, -3 dB rel. 1 kHz.
Microfoons:	2 stuks, ingebouwd.
Ingang:	Externe microfoon.
Uitgangen:	Neklus. Bandrecorder (3,5 mm, ingang: tip, uitgang: ring).
Voeding:	4 × LR6/AA 1,5 V penlight.
Levensduur batterij:	±100 uur.
Veldsterkte:	+12 dB rel. 100 mA/m bij 0,7 mV (70 dB SPL) vanaf de microfoons bij een afstand van 45 cm tot de ringleiding.
Vervorming:	<3%.
Versterking:	0,7 mV van de microfoons geeft 250 mV bij opname met een bandrecorder. De bandrecorderuitgang kan ook voor weergave worden gebruikt.
Stroomverbruik:	25-200 mA.
Gewicht:	±1,3 kg.
	Alle zaken betreffende de EU-Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG dienen gemeld te worden aan GN ReSound A/S.
Bestelnummer:	415 04 04

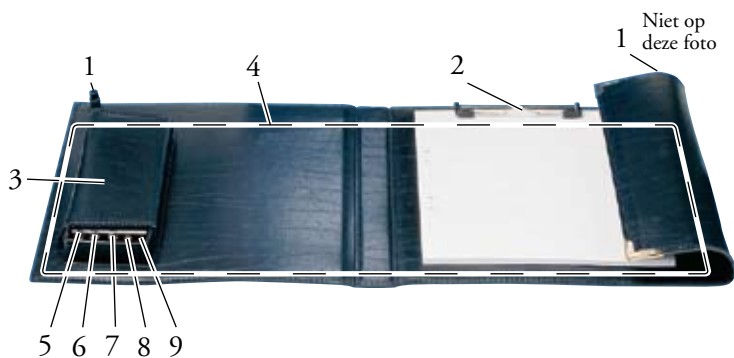

1. Microfoons
2. Paperclip
3. Vak voor batterijen en nekklus
4. Ingebouwde inductieve ringleiding
5. Bandrecorder in/uit
6. Microfoon in
7. Nekklus uit
8. AAN/UIT-schakelaar
9. LED-indicator AAN/UIT

BELGIË:

GN ReSound Belgium n.v.
 Pontbeekstraat 2 (2de verdiep)
 B 1702 Groot-Bijgaarden
 Tél. +32 2 229 34 60
 Fax +32 2 229 34 69

NEDERLAND:

GN ReSound bv
 Postbus 85
 6930 AB
 Westervoort
 Het Hazeland 5-7
 6931 KA
 Westervoort
 Tel. +31 26 31 95 000
 Fax +31 26 31 95 001
 info@gnsound.nl

PRODUCENT

in de betekenis van
 Europese Richtlijn Medische
 Hulpmiddelen 93/42/EEG:
GN ReSound A/S
 Lautrupbjerg 7
 DK-2750 Ballerup
 Denemarken
 Voor vragen m.b.t. service
 en producten: zie contact-
 gegevens voor elk land.